

La serie de balanzas de BBL ofrece tecnología de pesaje fiable, velocidad, estabilidad y fabricación de alta calidad con excelente precio / rendimiento en un paquete realmente compacto.

Las balanzas analíticas poseen un Sistema de Palanca Monolítico Doble, la precisión balancea un sistema de pesaje con medidor de deformación. Todos los modelos ofrecen calibración automática por un peso de calibración externo. La pantalla es fácil de leer y las teclas de control están ubicadas lógicamente.

Las balanzas BBL ofrecen varios programas de aplicación:

- ▶ Conteo
- ▶ Pesaje en porcentaje
- ▶ Formulación del neto total
- ▶ Conversión de la unidad de masa
- ▶ Pesaje de animales
- ▶ Unidades de peso distintas (granos, libras, quilates, etc.)
- ▶ 3 años de garantía

BBL 54, 61, 62, 63, 64 y 71 se pueden usar como "balanzas portátiles" porque pueden pesar usando una batería de bloque estándar de 9 V instalado dentro de la balanza en vez de usar una salida AC. La balanza se apaga automáticamente luego de 2 minutos sin uso para extender el tiempo de uso de la batería.

Las balanzas BBL pueden equiparse opcionalmente con una interfase RS-232 para conectarla con una impresora o PC.

BOECO MODELOS BBL

Modelo	Legibilidad	Capacidad	Tamaño del platillo
BBL 31	0,0001 g.	210 g.	80 mm. Ø
BBL 32	0,0001 g.	120 g.	80 mm. Ø
BBL 41	0,001 g.	300 g.	100 mm. Ø
BBL 42	0,001 g.	150 g.	100 mm. Ø
BBL 51	0,01 g.	3000 g.	174 x 143 mm.
BBL 52	0,01 g.	1500 g.	174 x 143 mm.
BBL 53	0,01 g.	610 g.	116 mm. Ø
BBL 54	0,01 g.	310 g.	116 mm. Ø
BBL 61	0,1 g.	6100 g.	174 x 143 mm.
BBL 62	0,1 g.	3100 g.	174 x 143 mm.
BBL 63	0,1 g.	1500 g.	174 x 143 mm.
BBL 64	0,1 g.	600 g.	174 x 143 mm.
BBL 71	1,0 g.	6000 g.	174 x 143 mm.

Todos los modelos BBL vienen con enchufe para conectar un paquete de batería recargable y un adaptador AC.

BBL 31
BBL 32




BBL 41
BBL 42



BBL 53
BBL 54



BBL 51
BBL 52
BBL 61
BBL 62
BBL 63
BBL 64
BBL 71

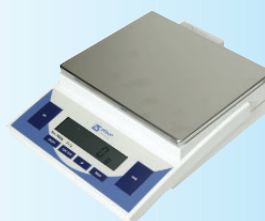

ACCESORIOS PARA LAS BALANZAS BBL

Código	Descripción
SDA 02	Interfase RS-232, para balanzas de precisión
SDA 03	Interfase RS-232, para balanzas analíticas (BBL 31+32)
SWE 21	Pesa de calibración, 200 g.; E2 para BBL 31, BBL 41
SWE 22	Pesa de calibración, 100 g.; E2 para BBL 32
SWE 63	Pesa de calibración, 100 g.; F2 para BBL 54, BBL 41
SWE 62	Pesa de calibración, 500 g.; F2 para BBL 53, BBL 64
SWE 61	Pesa de calibración, 1000 g.; F2 para BBL 63, BBL 62
SWE 45	Pesa de calibración, 100 g.; F1 para BBL 42
SWE 44	Pesa de calibración, 1000 g.; F1 para BBL 52
SWE 42	Pesa de calibración, 2000 g.; F1 para BBL 51,
SWE 41	Pesa de calibración, 5000 g.; F1 para BBL 71, BBL 61

PESAS DE CALIBRACIÓN



TRADUCCIÓN LIBRE DE
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
Rev 3